

REAGENT PACK HUMALYTE PLUS⁵

FINALIDADE:

Reagentes utilizados na calibração e manuseio do equipamento HUMALYTE PLUS⁵ Cat. 17470/20 para dosagem de íons Na, K, Cl e Ca.

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar entre 5 e 35°C.

STD A - Solução Padrão A: KCl 4.00 mmol/L, NaCl 96.0 mmol/L, Acetato de Sódio 46.0 mmol/L, CaCl₂ 1.0mmol/L

STD B - Solução Padrão B: KCl 8.00 mmol/L, NaCl 58.0 mmol/L, Acetato de Sódio 52.0mmol/L, CaCl₂ 2.0 mmol/L

PREPARO DOS REAGENTES:

Os reagentes são prontos para uso. Balançar o pack de reagentes antes de abrir. Deve-se evitar a contaminação dos reagentes após a abertura do Pack.

ESTABILIDADE:

Os reagentes são estáveis até o vencimento da data de validade estabelecida no rótulo, quando armazenados entre 5-35°C. O Reagent Pack não deve ser utilizado depois do vencimento da data de validade.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

PRECAUÇÕES:

- Quando o reagente entra em contato com amostras ou controles, deve ser manuseado como potencialmente infectante e deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os reagentes são irritantes para a pele. Em caso de contato com a pele, lavar a pele com muita água e, se a irritação persistir, consultar um médico.

INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTO:

Para a instalação correta do Pack de Reagentes ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do Humalyte Plus⁵.

PROPRIEDADES E USOS:

O Reagent Pack é para ser utilizado exclusivamente no equipamento HUMALYTE PLUS⁵.

APRESENTAÇÃO DO KIT:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
17470/83	STD A	1 x 650 mL
	STD B	1 x 350 mL

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **31-3067-6400** E-mail: invitroms@invitro.com.br

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

Fabricante: Human GMBH, Max-Planck-Ring 21, D 65205, Wiesbaden, Alemanha.





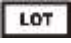

Regularizado por: Human do Brasil. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.

Telefone: 31-3067-6400 e-mail: invitroms@invitro.com.br

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

ANVISA: 10303460387 Classe de Risco: I

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO

	Data limite de utilização
	Limites de temperatura (conservar entre)
	Número do Catálogo
	Consultar Instrução de Uso
	Número do lote
	Produto Diagnóstico In Vitro