



HumaSRATE 24PT

Hemossedimentação




Sedimentação com Velocidade e Precisão

O procedimento no HumaSRate 24PT contempla as três fases da sedimentação, sendo uma leitura realizada a cada dez segundos, o que confere mais precisão e alta correlação com *Westergren*.


Taxa de Sedimentação Eritrocitária

A sedimentação eritrocitária no HumaSRate 24 PT ocorre em três fases:

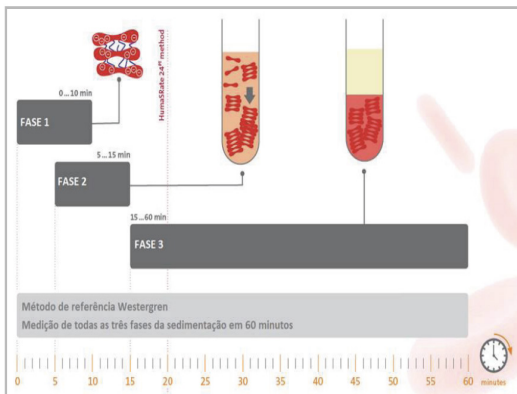


- **Fase 1 Agregação** - A agregação de eritrócitos é um aglomerado reversível de glóbulos vermelhos.
- **Fase 2 Sedimentação** - Eritrócitos se agregam de maneira especial para formar um rouleaux e descem para o fundo do tubo.
- **Fase 3 Acomodação** - As formações de rouleaux se reúnem na parte inferior.

Medição Real da Sedimentação

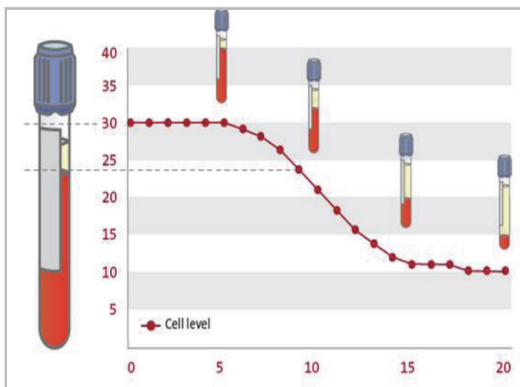

- Resultados precisos com sedimentação em curva única
- Registro contínuo a cada 10 segundos
- Uma curva ESR oferece mais informação do que apenas uma leitura ESR após 20 minutos
- Até três etiquetas no tubo EDTA não afeta a leitura

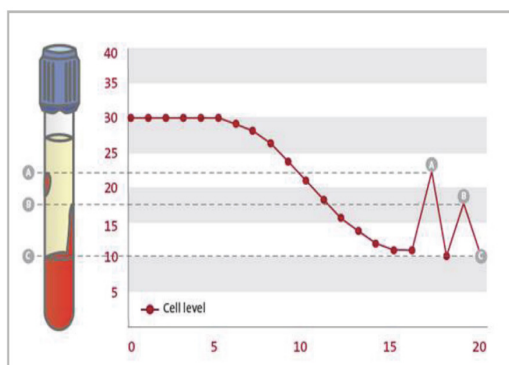

- Níveis de sedimentação pouco precisos são corrigidos
- Erros por manchas de sangue na parede do tubo são eliminados pelo algoritmo da curva de sedimentação



www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS